

## EM akku-drive®

### 電子式自動滴定/分注器

akku-drive 結合尖端科技和智慧設計是世界上首創的充電式 Liquid handling 產品

1. 只需一個分注或滴定的主機，搭配使用不同試劑的基座，主機可迅速的更換大幅減少成本及工作時間
2. 有 20ml 及 50ml 兩種容量的基座供選擇
3. 基座可 360°旋轉，避免操作時出液管直接面對人體
4. 雙行液晶顯示幕
5. 英文、德文、法文、西班牙文四種語言可選擇，清楚的步驟指示，簡單易操作
6. 每次充電量約可使用 30L 試劑，電量在 LCD 上以 % 顯示；也可插電使用

7. 微電腦按鍵控制，可自動滴定和分注，另可外接滑鼠或腳踏器操作

**\*滴定功能**

累積的滴定量可達 99.99ml


快速滴定鍵- Max 5ml/sec

**\*分注功能**

分注量 1-500ml(50ml 基座)

0.1-200ml(20ml 基座)

8. 自動連續分注高達 999 次
9. 可設定分注間隔時間 1-999 秒
10. 與液體接觸部分為硼矽玻璃、ECTF、FEP、PTFE 等材質，可蒸氣滅菌
11. 附 A32、A38、S40 三個轉接頭
12. 符合 DIN/ISO 9000 品質認證，每支都有序號及原廠證書

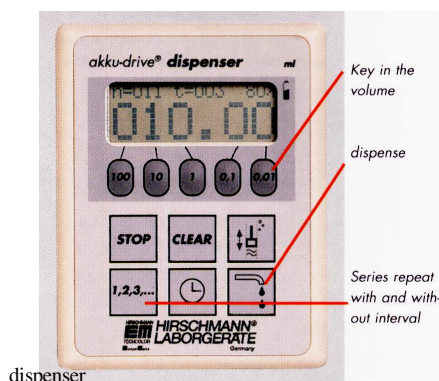

Order-no.	Description	A %	CV %
9568200	akku-drive® basic unit, 50 ml 110V	Resolution 7 µl	
9578200	akku-drive® basic unit, 20 ml 110V	Resolution 4 µl	
9560011	operation module "dispenser"	0.6	0.1
9560021	operation module "titration"	0.6	0.1