


EM dispenser 分注器



1. 耐酸鹼及有機溶劑
2. EM-dispenser 專利的兩側視窗設計，可輕易察覺氣泡的存在
3. 附有三個轉接頭，可直接安置於大部分的試藥瓶上，分注迅速、安全、精確
4. 所有與液體接觸部分為硼矽玻璃、陶瓷 ECTFE、FEP、PTFE 等材質
5. 耐撞擊的塑膠披覆外殼保護內部玻璃量筒

6. 階梯式調整容量，精準設定
7. 市面上唯一活塞採用氧化鋁材質的品牌(99.7% pure Al_2O_3)
8. 一活塞堅固耐用，不必擔心會有刮痕或磨損的問題
9. 一塑膠材質 (fluor plastics) 的活塞硬度不高，在使用上有較順暢的感覺。但根據測試，在長期使用有機溶劑下，其會有軟化的現象出現，而導致嚴重的誤差。
10. 一無 $4^{\circ}C$ - $50^{\circ}C$ 所產生的熱膨脹問題
11. 所有材質皆符合滅菌標準， $121^{\circ}C/2bar$
12. 符合 DIN/ISO 9000 品質認證，每支都有序號及原廠證書

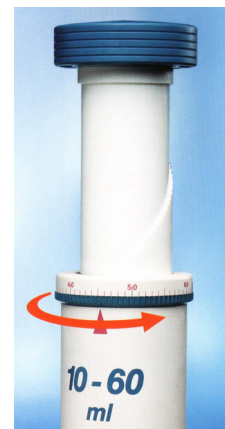

Order-no.	Volume ml	Division ml	R%	CV%
9310000	0.2 - 1.0	0.05	0.6	0.2
9320000	0.4 - 2.0	0.05	0.6	0.1
9330000	1.0 - 5.0	0.10	0.6	0.1
9340000	2.0 -10.0	0.25	0.6	0.1
9350000	5.0 -30.0	0.50	0.6	0.1
9360000	10.0 -60.0	1.00	0.6	0.1