

電動吸管輔助器 充電攜帶式 pipetus®-classic

榮獲2005年世界性“red dot”設計大獎



符合人體工學設計
長時間操作無負擔



0.2um 過濾頭（厭水性）

止逆閥

矽膠吸管接頭
不易老化

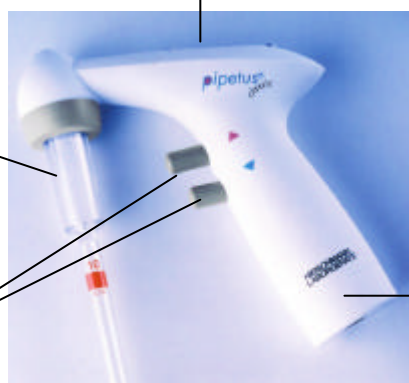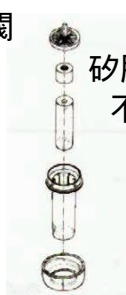

按鈕切換工作狀態

Ex/Blow out

Min/Max

LED 背光顯示

陶瓷合成壓鈕，抗腐蝕

標示，符合歐盟相關的法規。

- 適用容量 0.1 – 100ml 吸量管
- 專利設計止逆閥及過濾頭雙層保護，防止試劑吸入污染機體
- Ex/Blow out 自然重力/馬達強制排放切換，更省電
- Min/Max 2 段馬力，吸取黏稠性液體時更有力
- 手指壓吸排鈕深淺可控制吸排速度
- 具過度充電保護功能，特殊電路設計，充電後可連續操作時間高達 40 小時，電池無記憶效應，壽命長，不需經常更換電池
- 配件：充電器、壁掛架、過濾頭各 1

Order no.	Description
9908000	pipetus®-classic